




# EXLUX

## EXLUX 사용설명서

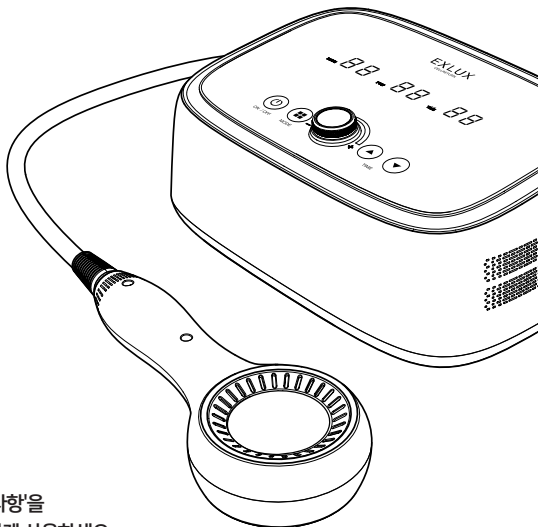

제품 사용 전에  
'안전을 위한 주의사항'을  
반드시 읽고 정확하게 사용하세요.

본 제품은 의료기기가 아닌 미용기기입니다.

---

## 목차

### 사용하기 전에

본 기기의 특징	04
각 부의 명칭	05
제품 규격	07
제품 구성	08

### 사용하기

사용방법	09
작동방법	10
사용 후 유지 관리/청소 방법	11

### 안전 주의사항

12

### 사용 시 주의사항

사용 관련 경고사항	17
제품 보관 관련 경고 및 주의사항	18

### 면책사항

19

### 문제해결

고장 신고 전 확인사항	20
제품보증서	21

### 기타

소비자분쟁 해결기준	22
유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 안내	23
폐 가전제품 처리 절차	23

## 사용하기 전에

### 본 기기의 특징

#### · 펄스 전자기장 마사지

전자기장을 몸속 깊숙히 침투시켜  
근육을 풀고 순환을 도와 피로한 몸에 도움을 줍니다.

#### · 안전하고 위생적인 믿을 수 있는 홈케어


비접촉 방식으로 사용하기에 안전하고 위생적입니다.

#### · 사용의 편리함을 생각한 디자인


휴대용 핸들 디자인으로 사용자가 쉽게 사용할 수 있습니다.

### 각 부의 명칭

#### 본체 - 앞면

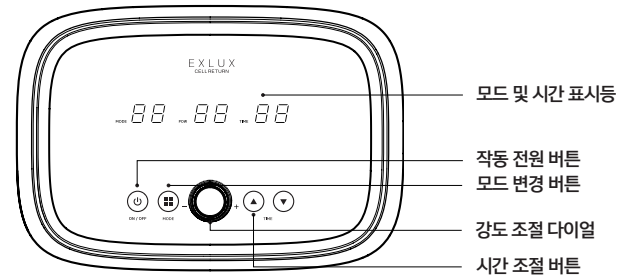


#### 본체 - 뒷면

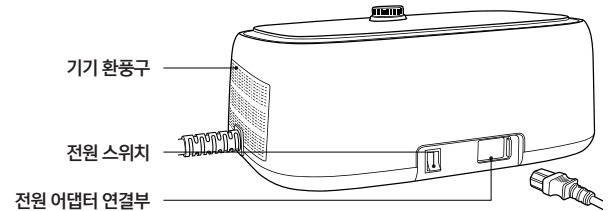


## 사용하기 전에

### 각 부의 명칭

핸들 - 앞면

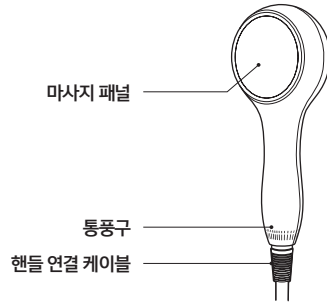

핸들 - 뒷면

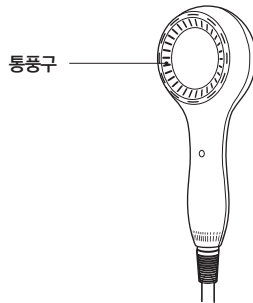

### 제품 규격


제품명	EXLUX
기기명칭	홈 마사지기
모델명	EL - A1001
입력전원	입력 AC 220-240V 50/60Hz 전력 1000W, 출력주파수 10Hz/25Hz/33Hz
크기	본체 350 X 240 X 140 (mm) 핸들 325 X 120 X 53 (mm) 핸들 연결 케이블 1,260 (mm)
중량	5.4 kg (오차범위: ±5%)
제조원/제조국	STG24 China / China



전자파적합등록번호  
R-R-STg-EL-A1001

\* 디자인과 제품 규격 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 구성

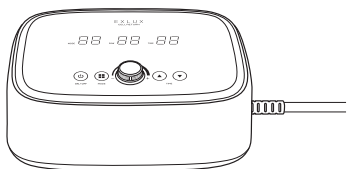


본체



핸들




퀵가이드

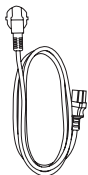


전원 케이블


사용 방법

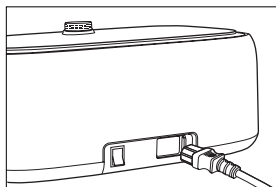


1 전원 케이블 연결 후 연결부 옆에 있는 전원 스위치를 켜주세요.

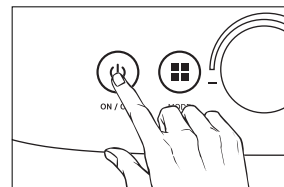

2 본체의 ON/OFF 버튼을 눌러 기기를 켜주세요.

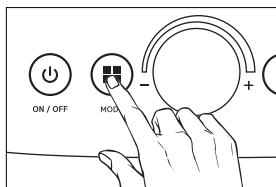

3 모드 버튼을 누르거나 모드 다이얼을 돌려 마사지 강도를 높이거나 낮춥니다. (총 3가지 모드로 최초 실행 시 S1 모드 권장)

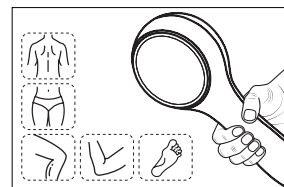

4 핸들을 사용하여 어깨, 손, 등, 허리, 엉덩이, 다리, 무릎 및 발에 적용할 수 있습니다.

참고

- EXLUX는 버튼방식으로 전원 버튼을 한번 누르면 알림음과 함께 디스플레이가 실행됩니다.
- 20분 실행 완료 시 알림음과 함께 자동으로 종료됩니다.
- 본 제품은 펄스 전자기장 마사지로 1일 1회 사용을 권장드립니다.

## 사용하기

### 작동 방법



#### ON / OFF 버튼

이 버튼을 짧게 누르면 알람음과 함께 제품이 실행/종료됩니다.  
기본 실행 시간은 20분으로 초기 실행 강도는 0이며  
실행 시간(20분)이 완료되면 알람음과 함께 자동 종료됩니다.



#### MODE 버튼

이 버튼을 짧게 누르면 A1 - A2 - A3 - A1 모드가 순서대로 전환됩니다.  
누를 때마다 알람음이 발생하고 3초 뒤에 해당 모드가 실행됩니다.  
대기 과정에서 세 번의 알람음이 발생하고 강도를 조절할 수 없습니다.

모드 A1 : 10Hz = 3초 ON / 3초 OFF  
반복 모드 A2 : 25Hz = 3초 ON / 3초 OFF  
반복 모드 A3 : 33Hz = 3초 ON / 3초 OFF - 반복



#### 강도 조절기

시계 방향으로 회전하여 모드를 조절합니다.  
알람음이 발생한 뒤 강도가 증가하고 최대 5단계입니다.  
시계 반대 방향으로 돌리면 강도가 감소하고 최소값이 0이면 알람음이  
나오지 않고 제품이 대기 상태로 들어갑니다.



#### TIME + 버튼


이 버튼을 누르면 "삐" 소리와 함께 작동 시간이 5분(최대30분) 증가합니다.




#### TIME - 버튼

이 버튼을 누르면 "삐" 소리와 함께 작동 시간이 5분(최대30분) 감소합니다.

### 사용 후 유지 관리/청소 방법

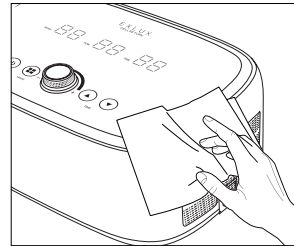

[본체]

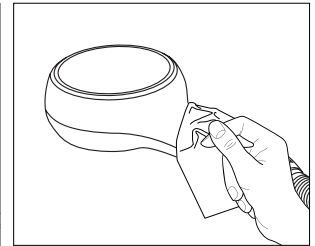

[핸들]

- 사용 후 얼룩이 있는 경우,  
깨끗한 수건을 사용하여 본체와 핸들 표면을 가볍게 닦아주세요.

#### 참고

- 제품을 닦기 전에 플러그를 뽑으세요.
- 건조하고 깨끗한 수건을 사용하여 제품 표면을 닦으세요.
- 제품 표면이 물, 커피 또는 기타 액체에 닿을 경우 마른 수건으로 깨끗이 닦으세요.  
(기기가 젖지 않도록 주의하세요.)

## 안전 주의사항

### 반드시 지켜주세요!

주의 사항은 "참고"와 "주의", "경고"의 세 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

이 기호들은 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

#### ❗ 참고

기능에 대한 참고사항을 알립니다.

#### ⚠ 주의

표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

#### ⚡ 경고

표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

\* 사용설명서를 읽고 난 후에는 반드시 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 보관해 주세요.

### 아래와 같은 경우, 사용을 금지해주세요.



- 사용 부위에 열이 올라있는 경우(예: 음주, 일광화상, 사우나 직후, 반신욕 직후, 필링 직후 등등)
- 사용 부위의 피부상태에 이상이 있는 경우(피부암환자, 감염성 피부질환, 피부상처 등)
- 금속 기구를 사용하거나 금속 물질이 체내에 존재하는 경우
- 눈(안구 돌출부분)의 직접적인 접촉

## 안전 주의사항

아래와 같은 경우, 전문의와 상담하시기 바랍니다.




- 장기간의 병원치료나 후유증을 가지고 있는 경우
- 임산부
- 사용 중 이상증상이 나타날 경우 즉시 사용을 중지하고 전문의와 상담하세요.

\* 궁금한 사항이 있으시면 셀리턴 고객센터 : 1688-1026으로 문의하여 주시기 바랍니다.

제품을 안전하게 사용하려면?




기기에 충격 및 과한 무게를 실지 마십시오.  
기기의 내부를 임의로 분리, 개조하지 마십시오.

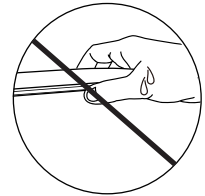

기기는 습한 환경에 취약하니  
젖은 손으로 기기를 사용하거나 물기와  
가까운 장소에 보관하지 마십시오.



사용 전에 기기가 닿는 부분 및  
주변의 귀 금속은 제거하십시오.

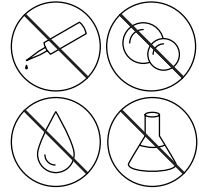

기기를 물로 씻거나, 오일,  
알코올류(코팅이 벗겨짐)로 닦지 마십시오.





제품 작동 중 핸드들을  
다른 전자 제품(모바일 기기, TV 등)  
옆에 두고 사용하지 마십시오.



어린이 손이 닿지 않는 곳에  
보관하여, 기기를 작동시키지  
않게 주의하여 주십시오.



마그네틱이 포함된 카드 등을  
가까이 두지 마세요.

**! 참고**

-제품 사용 시 착용 부위에 미세하게 온열감이 느껴질 수 있습니다.

**— 사용 관련 경고사항**

**! 경고**

- 수면 중에는 제품을 사용하지 마세요.
- 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.
  - 진동이 심한 곳이나 자석이 있는 제품으로부터 멀리해 주세요.
- 제품에 장애가 발생하면 즉시 사용을 중단하세요.
- 정전이 발생한 경우에는 즉시 전원을 끄고 사용을 중단하세요.
- 사용 시 물과의 직접적인 접촉을 피하세요.
- 제품 작동 중 이불이나 담요를 사용하여 제품을 덮지 마세요.
- 다른 기기와 동시에 사용하면 위험할 수 있으니 주의하세요.
- 전원 코드가 손상된 경우 즉시 사용을 중단하세요.
- 사용 전 사용환경에 주의하세요.
  - 습기, 먼지가 많은 곳, 화학적 환경 또는 기타 불리한 환경에서 사용하지 마세요.
- 제품 작동 중 금속 물체에 너무 가까이 접근하지 마세요.
- 사용 후 전원 플러그의 끝을 잡고 뽑아주세요.
- 권장 사용횟수(1일 1회, 30분 이내)에 맞춰 사용하세요.
- 최초 사용시 가장 낮은 강도부터 시작하시고, 사용자의 상태에 따라 조절하세요.
- 사용 설명서에 따라 제품을 사용하고 범위에 벗어난 사용을 하지 마세요.

### 제품 보관 관련 경고 및 주의사항

#### ⚠ 경고

- 직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 등 열이 나는 곳을 피해주세요.  
- 화재의 위험이 있습니다.
- 전열기 등 열이 발생하는 장소에 보관하지 마세요.  
- 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 습기, 먼지나 그을음 등이 많은 장소에 보관하지 마세요.  
- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

#### ⚠ 주의

- 직사광선에 노출되지 않도록 주의하세요.
- 온도가 너무 높은 곳(35℃ 이상)이나 낮은 곳(5℃ 이하), 습기가 많은 곳에 놓지 마세요. (고온/저온 및 습도가 높은 곳에 제품을 보관하지 마세요.)

### 면책사항

- 제조사는 사용자의 부주의한 관리나 동작으로 발생하는 제품상의 문제 및 기타 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 사용설명서의 정보는 현재 제품사양을 기반으로 작성되었으며 내용이 일부 다를 수 있습니다.
- 모든 규격 및 기능은 성능향상을 위해 사용자에게 예고 없이 변경될 수 있습니다.

---

## 문제 해결

---

### 고장 신고 전에 확인하세요

---

이런 증상인 경우

조치하세요

디스플레이가  
작동되지 않습니다.

- 콘센트의 전원이 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.
- 전원 스위치가 켜져 있는지 확인합니다.

---

제품이 제대로  
작동하지 않습니다.

- 각 기능 버튼이 켜져 있는지 확인합니다.
- 강도가 1~5 위치로 설정되어 있는지 확인합니다.

---

버튼이 제대로  
작동하지 않습니다.

- 각 버튼을 눌러 해당 화면이 출력되는지 확인합니다.
  - 제품의 전원을 껐다 켜 후 확인합니다.
- 

---

### 제품 보증서

---

구매시 제품 무상수리 보증기간 : 12개월

주요부품 보유기간 : 6년

제품품질 보증기간 : 12개월

---

## 기타

### 소비자 분쟁 해결기준

소비자 피해유형	보상내역
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 구입가 환불
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상수리
제품 구입시 운송과정에서 발생한 피해	제품 교환

\* 명시되지 않은 사항이나 규정에 다툼이 있을 경우 소비자분쟁 해결기준에 따릅니다.

\* 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 반드시 사용설명서를 읽어 주시기 바랍니다.

\* 수리 시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 원산지나 제조사의 부품이 적용될 수 있고, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되며 기능상으로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품 중 일부는 제조국과는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.

### 유상서비스(고객의 비용 부담) 안내

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 셀리턴 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (셀리턴 구성품 및 소모품은 셀리턴 고객센터에서 구입 가능)
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 사용전압을 오인하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 셀리턴 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 셀리턴 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

### 폐 가전제품 처리 절차

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 행정복지센터(주민센터)로 연락하시기 바랍니다.

\* 본 설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



CELL RETURN

셀리턴 대표 전화번호

셀리턴 온라인 상담

셀리턴 고객센터 (전국 어디서나)

**1688-1026**

09:30 - 18:30 주말 및 공휴일 휴무

12:00 - 13:00 점심시간

· **전화 걸기 전**

제품 시리얼, 제품명, 모델명, 고장상태, 구매정보 (주문자명, 연락처, 주소)를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

· **전화 연결 시**

ARS 안내에 따라 문의유형을 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.

셀리턴 공식 홈페이지

[www.cellreturn.com](http://www.cellreturn.com)

[cellreturnmall.co.kr](http://cellreturnmall.co.kr)

인터넷 서비스를 이용하시면 제품상담을 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.

· 카카오톡 플러스친구 : @셀리턴고객상담

전원(전압, 주파수)이 다른 해외에서는 변압기를 사용해주세요.

Copyright © 2021 CELLRETURN. All Rights Reserved.